

PERIODONTOGRAMA DIGITAL SAP

Guía para el usuario

Esta versión de acceso libre no permite, una vez cerrado, volver a editar o cargar datos en el mismo periodontograma. **Antes de cerrarlo debe guardarlo en su dispositivo** como PDF o imprimirlo.

Nota: Los usuarios de computadoras Apple, deberán utilizar como navegador Google Chrome, para la correcta visualización del periodontograma.

Carga de datos

Se recomienda comenzar registrando las piezas ausentes y los implantes presentes, y continuar con los parámetros periodontales de cada sitio, cargando los datos de izquierda a derecha utilizando la tecla Tab



SUPERIOR

	1.8	1.7	1.6	1.5
Ausente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Implante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Movilidad	0	0	0	1
Pronóstico individual				
Lesión de furcación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sangrado / Supuración	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Biofilm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Encía queratinizada (mm)	0	0	0	0
Nivel de inserción	0 0 0	5 6 6	3 5 2	4 8 6
Profundidad de sondaje	0 0 0	4 5 5	3 4 2	3 5 4
Posición del margen gingival	0 0 0	-1 -1 -1	0 -1 0	-1 -3 -2

Piezas ausentes: clicar sobre el casillero. La pieza dentaria se pinta de gris.


Implantes presentes: clicar sobre el casillero. La imagen dentaria se reemplaza por un implante.

Movilidad: se registra numericamente de 1 a 3 según la clasificación.

Encía queratinizada: se registra el valor numérico en mm.

Profundidad de sondaje – Nivel de inserción: para cada sitio se comienza con el registro numérico de la *profundidad de sondaje*, luego con la tecla Tab se pasa automáticamente al casillero de *nivel de inserción* para registrar dicho valor. Se continúa del mismo modo al sitio siguiente (siempre utilizando la tecla Tab). Los valores de PS de 5 o más se verán en rojo y del NI en marrón.

VESTIBULAR

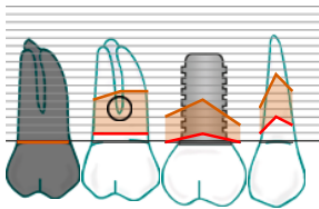

Nota: Al cargar la profundidad de sondaje y nivel de inserción, se registra de manera automática la posición del margen gingival y el área anaranjada sombreada que representa la bolsa periodontal.

PALATINO

Posición del margen gingival	0 0 0	-2 -2 -1	0 0 0	0 -2 -1
Profundidad de sondaje	0 0 0	5 6 5	4 3 3	6 7 7
Nivel de inserción	0 0 0	7 8 6	4 3 3	6 9 8
Biofilm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sangrado / Supuración	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lesión de furcación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nota				

Biofilm: se registra en seis sitios por diente. Tres vestibulares y tres palatinos/linguales.

Sangrado/supuración: haciendo 1 click se registra el sangrado. Con 2 clicks se registra la supuración.

Lesión de furcación:

Hacer click repetidamente en el casillero permite establecer el grado de furcación.

- 1 click: grado 1
- 2 clicks: grado 2
- 3 clicks: grado 3
- 4 clicks: reiniciar

Análisis de los datos clínicamente relevantes: Una vez completado el periodontograma, el sistema automáticamente analizará los datos registrados arrojando los siguientes resultados al pie.

Cantidad de sitios con PS de 5 mm o más= Mayor valor del NI proximal= % de sitios con Biofilm % de sitios con SS

Nota:

% de sitios con SS: El porcentaje de sitios con sangrado al sondaje no incluye a los implantes. Tomará en cuenta exclusivamente a las piezas dentarias.

% de sitios con biofilm: Incluye a todas a las superficies de dientes y de implantes.


Como imprimir/guardar el periodontograma

Para imprimir o guardar el periodontograma online SAP dirigirse al extremo inferior derecho al final de la página y clicar sobre el ícono “imprimir”



Imprimir

Una vez abierta la ventana de impresión, seleccionar la impresora correspondiente y los siguientes parámetros: horizontal, hoja A4, sin márgenes, escala personalizada 70% y gráficos en segundo plano. De esta manera quedará cada maxilar en una hoja.

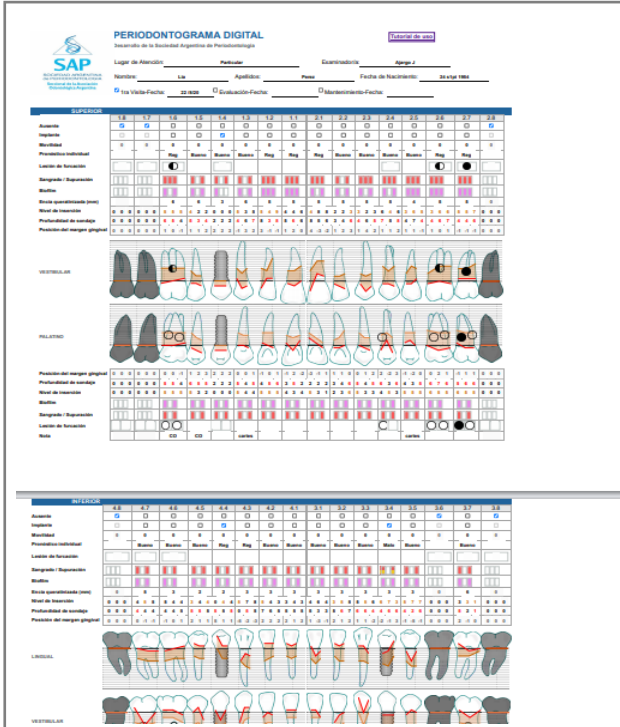

Imprimir 4 hojas de papel

Destino EPSON XP-211 214 21

Páginas Todos

Copias 1

Diseño Horizontal

Color Color

Tamaño del papel A4 (210 x 297 mm)

Páginas por hoja 1

Márgenes Ninguna

Escala Personalizado

Opciones Gráficos en segundo plano

Imprimir
Cancelar

Guardar como PDF



Para guardar el periodontograma como PDF en su disco duro, en la ventana de impresión seleccione *Guardar como PDF*. Hacer click en Aceptar, elegir un nombre de archivo y una ubicación donde se guardará el archivo PDF.

Seleccionar los parámetros: horizontal, hoja A4, sin márgenes, escala personalizada 70% y gráficos en segundo plano. De esta manera quedará cada maxilar en una hoja.

Imprimir 4 hojas de papel

Destino EPSON XP-211 214 21

Páginas Todos

Copias 1

Diseño Horizontal

EPSON XP-211 214 216 Series

Guardar como PDF

Guardar en Google Drive

Ver más...